


LES CONSEILS D'UTILISATION DE MA GOUTTIÈRE

Pourquoi bien positionner ta langue ?

Au repos, la langue est en position haute contre le palais, afin de le développer. Si la langue ne s'appuie pas contre le palais, celui-ci devient trop étroit pour le placement de tes dents définitives.

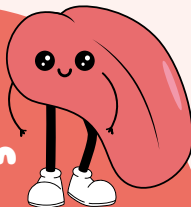

Comment la porter ?

- Tu dois positionner ta gouttière en bouche, les masses au centre se placent sous ta langue, comme un ascenseur pour coller ta langue à ton palais.
- Tu dois porter ton appareil 2 h par jour, en réalisant une autre activité : La lecture, la télévision, les devoirs, la tablette ou autre. Ce qui va t'aider à mieux le porter la nuit.
- Tu dois ensuite le porter toute la nuit. Les premiers temps, tu risques de le perdre au cours de la nuit, c'est normal. Il faut persévérer.
- Ta gouttière est un appareil fonctionnel. Elle va travailler sur ton occlusion, sur ta posture linguale pour bien positionner ta langue à ton palais, mais aussi sur ta ventilation, pour t'aider à bien respirer par ton nez.

⚠ Il faut suivre scrupuleusement les indications de ton professionnel de santé.

IMPORTANT

Matière de grade médical, sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens, dispositif médical de classe I. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, aux respirateurs buccaux exclusifs et aux apnées du sommeil.

 Fabriqué et conditionné en France par :
 LABORATOIRES INNOVA PHARM • BP 30451 • 49304 CHOLET CEDEX • FRANCE



Consulte les instructions d'utilisation et retrouve plus de conseils sur ton appareil dans l'espace patient du site www.innovapharm.fr



LES CONSEILS D'ENTRETIEN DE MON APPAREIL



As-tu des animaux de compagnie ?

Si oui, range bien ton appareil car ils en raffolent !



Nous te recommandons 3 brossages par jour après les repas.

Pense à brosser toutes les faces de tes dents et effectue un brossage soigneux, même si c'est plus difficile les jours suivant la pose de ton appareil. A la fin de ton brossage, vérifie que tes dents sont propres !



Comment nettoyer ton appareil ?

- Ton appareil se nettoie à l'eau froide, avec une brosse à dents et du dentifrice, avant et après chaque utilisation.
- Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil bien sec dans sa boîte, toujours propre.
- Une fois par semaine, tu peux placer ton appareil dans un bain de bouche ou toute autre solution prescrite par ton professionnel de santé.
- Ne le fais JAMAIS bouillir.
- Si ton appareil est abîmé, tu dois en informer ton professionnel de santé.

⚠ Si tu ne respectes pas ces conseils, des réactions inflammatoires risquent d'apparaître.