

**L'ORTHODONTIE
FONCTIONNELLE**

• depuis 1999 •



FABRICATION FRANÇAISE



Orthodontie Fonctionnelle depuis 1999

Depuis 1999, les laboratoires Innova Pharm se consacrent **EXCLUSIVEMENT** au développement de l'orthodontie fonctionnelle. Nous souhaitons apporter le meilleur, non seulement dans la qualité de nos produits qui répondent tous aux normes FDA et USP classe VI, mais aussi dans la qualité de notre relation, relation que nous voulons empreinte de simplicité, de proximité et de disponibilité.

Les d'Innova pharm

CRÉATION

Concepteur et fabricant en France

QUALITÉ

Gamme médicale
Sans : phtalate,
bisphénol,
perturbateur
endocrinien

INNOVATION

Répondant
aux évolutions
des concepts
fonctionnels

SERVICES

Pour vos patients :
Vidéos, fiches,
livrets et carnet de
traitement

DISPONIBILITÉ

Écoute et réactivité



DÉMARCHE
ENVIRONNEMENT



FABRICATION
FRANÇAISE

LABORATOIRES
Innova Pharm
CONCEPTEURS & FABRICANTS

www.innovapharm.fr



Légendes



VENTILATION



DÉGLUTITION



MASTICATION

Vos interlocuteurs

Dr Patrice NICOLLEAU : Orthodontiste et concepteur

Laure DA COSTA : Responsable qualité et assistante dentaire

Elisabeth ROBILLARD : Directrice commerciale

Élodie CAILLEAU : Adjointe de direction

Charlotte GARREAU : Chargée de développement commercial et marketing

Sommaire

APPAREIL D'EXERCICE DE 1^{ère} INTENTION

 Déglutix	2
---	---

APPAREIL DE 1^{ère} INTENTION

ventilation - déglutition - béance

 Écrans	3
---	---

INTERCEPTION POUR CLASSE I

ventilation - dysfonctions linguales et labiales

 Gouttière classe I	4
---	---

INTERCEPTION POUR CLASSE II

ventilation - dysfonctions linguales et labiales

 Gouttière classe II	5
--	---

 Gouttière cfp	6
--	---

INTERCEPTION POUR CLASSE II

ventilation - dysfonctions linguales et labiales
ronchopathie, bruxisme et dysfonctions
cranio-mandibulaires

 Gouttière carrée	7
---	---

INTERCEPTION POUR CLASSE III

ventilation - dysfonctions linguales et labiales

 Gouttière classe III	8
---	---

Interception - contention

 Procluseur	9
---	---

Appareils auxiliaires au traitement multibagues

 Gouttières bagues	10
--	----

COMMENT CHOISIR LA TAILLE DE L'APPAREIL ?	11
--	----

COMMENT CHOISIR LA DENSITÉ DE L'APPAREIL ?	11
---	----

OUTILS DE COMMUNICATION

 Le carnet de traitement	12
--	----

 Le livret de traitement	12
--	----

 Le livret Orthondie Fonctionnelle	13
--	----

Les fiches	14
-------------------------	----

OUTILS POUR VOTRE CABINET

Les posters	15
--------------------------	----

Les vidéos	15
-------------------------	----

NOTRE SITE INTERNET

Espace particulier	16
---------------------------------	----

Espace professionnel	17
-----------------------------------	----

L'ORTHODATEUR	18
----------------------------	----

MODE D'UTILISATION DES APPAREILS	20
---	----

ENTRETIEN DES APPAREILS	21
--------------------------------------	----

COMPOSITION DES APPAREILS	21
--	----

NOS JOURNÉES DE FORMATION	22
--	----

 NOTRE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE	23
--	----

NOS TARIFS & PANACHAGES	24
--	----

Appareil d'exercice de 1^{ère} intention



Déglutix

ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS



Écran conçu spécifiquement pour la rééducation de la déglutition secondaire par action réflexe.

ACTIONS

La présence du bouclier empêche la langue de se projeter entre les lèvres, il n'y a plus de contact lèvres-langue initiateur de la déglutition primaire (dysfonctionnelle).

Les aérateurs placés au niveau des extensions labiales, rendent impossible la réalisation d'un joint étanche par les lèvres.

Afin de déglutir, l'enfant doit serrer les dents et placer sa langue contre son palais. Il réalise ainsi une déglutition secondaire correcte.

Cette nouvelle déglutition se fait **SANS ACTION CONSCIENTE**. L'apprentissage s'effectue **SPONTANÉMENT**.



TAILLE ET DENSITÉ

Taille small, large et x-large :
1 densité (souple)

CONTRE-INDICATIONS

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.



3 TAILLES

3 COULEURS



Évolution d'un cas à 3 mois, avec le port du DÉGLUTIX



Décembre 2016



Février 2017

Appareil de 1^{ère} intention

VENTILATION, DÉGLUTITION, BÉANCE



Écrans simples

ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS



ACTIONS

L'écran exerce une pression sur les incisives supérieures lorsqu'il existe un décalage antéropostérieur entre les dents et diminue les contractions des joues à l'origine des palais étroits.

La respiration doit être exclusivement nasale. L'écran permet à l'enfant d'acquiescer cette respiration et ainsi de développer harmonieusement son maxillaire et sa mandibule.

La déglutition se réalise dents serrées. L'interposition de l'écran entre les lèvres et les dents empêche le contact lèvre-langue à l'origine des béances antérieures.

L'écran est un substitut de la succion du doigt ou de la sucette. Il peut faire disparaître cette habitude nocive et rétablir un environnement fonctionnel favorable à la croissance harmonieuse des mâchoires et des dents.

2 TAILLES

Écran orthodontique E.O



TAILLE ET DENSITÉ

SIMPLE :

Taille small :
1 densité (souple)

Taille large :
2 densités (souple, rigide)

AVEC BUTÉE :

Taille small, large :
1 densité (souple)

CONTRE-INDICATIONS

Simple et avec butée :

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Occlusions de classe III ou tendances prognathiques.

Respirateurs buccaux exclusifs.



Écrans avec butée

Actions identiques à l'écran simple
Action spécifique de l'écran avec butée

L'écran orthodontique avec butée (EOB) est conseillé dans les cas de décalages dentaires, lorsque la mâchoire inférieure est en retrait. La butée entraîne une propulsion mandibulaire et oriente la langue vers les papilles palatines pour une déglutition secondaire.

2 TAILLES



Écran orthodontique avec butée E.O.B

Interception pour Classe I

VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES



Gouttière classe I

ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS ET ADULTES

Chez l'enfant : correction des troubles fonctionnels et oclusaux dans un cadre préorthodontique.

Chez l'adulte : traitement de la ronchopathie. Relâchement musculo-articulaire.

ACTIONS

La gouttière Classe I favorise la correction des **dysfonctions linguales** telles que la pulsion linguale antérieure (suction de la langue) et la déglutition.

La langue est placée en position haute grâce aux masses bilatérales (Brevet Innova Pharm).

Le **bouclier vestibulaire** corrige la ventilation orale en ventilation nasale.

Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnaire et favorisent la croissance mandibulaire.

La forme de l'**arcade mandibulaire** est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'**engrènement des secteurs latéraux**.

La mandibule reste positionnée en Classe I.



4 TAILLES

TAILLE ET DENSITÉ

Taille small, middle, large :
3 densités
(souple, médium, rigide)

Taille X-large : 2 densités
(souple, médium)

CONTRE-INDICATIONS

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.



Gouttière Classe I
Bi-densité médium/rigide

EXISTE EN BI-DENSITÉ

1 taille (middle)
2 densités (souple/médium, médium/rigide)

AVANTAGES DE LA GOUTTIÈRE BI-DENSITÉ

①

Grâce à un procédé innovant et breveté, elle associe 2 densités différentes d'une même matière.

Interception pour Classe II

VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES



Gouttière classe II

ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS ET ADULTES

ACTIONS

Aide à corriger la ventilation par la présence d'un bouclier vestibulaire.

Permet par son ascenseur lingual (masses bilatérales), l'établissement de la déglutition secondaire.

Place la langue en position haute grâce aux masses bilatérales.

Favorise l'éruption correcte des dents dans un cadre préorthodontique.

Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnaire et favorisent la croissance mandibulaire transversale.

L'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser **l'engrènement des secteurs latéraux**.

Aide au soulagement des ATM chez l'adulte.



Gouttière Classe II médium



4 TAILLES

TAILLE ET DENSITÉ

Taille small, middle, large :
3 densités
(souple, médium, rigide)

Taille X-large : 2 densités
(souple, médium)

CONTRE-INDICATIONS

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.



i Retrouvez à la page suivante la gouttière CFP Classe II : Taille intermédiaire entre la gouttière Classe II small et Classe II middle.

2

Elle permet d'allier la souplesse en regard des parties fragiles (lèvres, joues) et la rigidité au niveau des arcades dentaires.

3

Elle assure une plus grande longévité car les parties recevant les forces occlusales sont renforcées.

EXISTE EN BI-DENSITÉ

3 tailles (small, middle, large)

2 densités (souple/médium, médium/rigide)



Gouttière Classe II Bi-densité souple/médium

Interception pour Classe II

VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES



Gouttière CFP

ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS



ACTIONS

Aide à corriger la ventilation par la présence d'un bouclier vestibulaire.

Permet par son ascenseur lingual (masses bilatérales), l'établissement de la déglutition secondaire.

Place la langue en position haute grâce aux masses bilatérales.

Favorise l'éruption correcte des dents dans un cadre préorthodontique.

Cette gouttière pour vos patients en Classe II est une taille intermédiaire entre la taille small et middle de la gouttière de Classe II de la gamme standard.

(Page 5)

Gouttière CFP souple



Gouttière CFP médium

TAILLE UNIQUE



Gouttière CFP rigide



TAILLE ET DENSITÉ

Taille unique :
3 densités
(souple, médium, rigide)

CONTRE-INDICATIONS

Ne convient pas aux enfants
de moins de 36 mois.



Prix dégressif toute l'année

à partir de 5 pièces

+ 1 appareil offert
par dizaine commandée.

Interception pour Classe II

VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES -
RONCHOPATHIE (RONFLEMENT SANS APNÉE) - BRUXISME -
DYSFONCTIONS CRÂNIO-MANDIBULAIRES



Gouttière carrée

ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS ET ADULTES

Seul appareil fonctionnel conçu selon la Charte de KORKHAUS pour vos pistes PLANAS.

GOUTTIÈRE
CARRÉE

innovations

ACTIONS

Interception en denture mixte, en complément ou en sortie des pistes de PLANAS.

Permet des exercices de mastication unilatérale alternée.

La forme en U est un conformateur de l'arcade mandibulaire.

La forme de l'arcade maxillaire respectant les valeurs de la charte de KORKHAUS favorise l'occlusion latérale.

Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale.

Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions de la zone labio-mentonnière et **favorisent la croissance mandibulaire transversale.**

Le plan de propulsion libère la mandibule et favorise l'établissement de la déglutition secondaire.

La langue est placée en position haute grâce aux masses bilatérales inférieures.



Gouttière carrée médium

10 TAILLES

se mesure à l'aide d'un tableau de concordance correspondant à la Charte de KORKHAUS. (voir page 11)

TAILLE ET DENSITÉ

10 Tailles : 1 densité (médium)

CONTRE-INDICATIONS

Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.

MASTICATION

Des **exercices de mastication** peuvent être réalisés suivant les indications du praticien.



Évolution d'un cas, à 12 mois, avec le port de la gouttière Carrée



Décembre 2010



Décembre 2011

Interception pour Classe III

VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES



Gouttière Classe III

ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

GOUSSIÈRE
CLASSE III

fronzi.com

ACTIONS

Favorise la correction des dysfonctions linguales telles que la pulsion linguale antérieure (suction de la langue) et la déglutition primaire.

Place la langue en position haute grâce aux masses bilatérales.

Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labiomentonnière et favorisent la croissance mandibulaire transversale.

Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale en ventilation nasale.

Le surplomb incisif est augmenté pour la **correction des articulés incisifs croisés.**

La forme en U de l'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser **l'engrènement des secteurs latéraux.**



3 TAILLES

TAILLE ET DENSITÉ

Taille **small, middle, large** :
2 densités (souple, médium)

CONTRE-INDICATIONS

Ne convient pas aux enfants
de moins de 36 mois.



Profitez de la gouttière standard à 20€ TTC l'unité avec le tarif dégressif par 100 !
(Valable uniquement sur la gamme standard, ce tarif comprend les 10 appareils offerts)



Évolution d'un cas, à 7 mois,
avec le port de la gouttière Classe III



Décembre 2014



Juillet 2015

Interception contention



Proccluseur

ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS



ACTIONS

Après une phase d'interception afin de stabiliser le résultat obtenu et attendre l'éruption des secteurs latéraux grâce aux pistes de guidage de l'occlusion.

En contention après traitements multibagues. Indentations de 14 à 24 et de 34 à 44. Les pistes postérieures libèrent l'occlusion molaire pour une mise en fonction physiologique.

Rééducation de la ventilation nasale.

Il peut aider à **lever une supraclusion**.



8 TAILLES

EXISTE EN MODULABLE

8 tailles (se mesure à l'aide d'une règlette).

La matière du proccluseur modulable réagit au contact de la chaleur, vous permettant de mouler l'appareil directement en bouche. Les vidéos du montage des appareils sont disponibles sur [www.innovapharm.fr / fiches produits](http://www.innovapharm.fr/fiches-produits) en étant connecté sur votre espace pro ou sur **Youtube**.

Se mesure à l'aide d'une règlette. (voir page 11)

TAILLE ET DENSITÉ

8 tailles : 1 densité (médium)

CONTRE-INDICATIONS

Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

Occlusion de Classe III.



AVANTAGES DU PROCCLUSEUR MODULABLE

①

Permet d'obtenir un appareil individualisé (en tenant compte de la largeur des arcades, de la variabilité des formes et des axes coronaires) **SANS** phase de laboratoire.

②

Réalisation de l'appareil au cabinet : gain de temps.

③

Meilleure tenue de l'appareil en bouche grâce aux indentations individualisées.

Appareils auxiliaires au traitement multibagues



Gouttières bagues

ENFANTS À PARTIR DE 10 ANS

GOUTTIÈRE
BAGUES

medimory

ACTIONS

La présence de masses bi-latérales permet de continuer la rééducation combinée de la déglutition et de la posture linguale.

Favorise l'établissement de la ventilation nasale.

Favorise le travail des tractions intermaxillaires en plaçant les arcades dentaires en bout à bout (possibilité d'adapter l'appareil en le coupant avec des ciseaux).

Protège les tissus mous (lèvres, joues) lors de la période d'adaptation aux multibagues.

Gouttière bagues uni-maxillaire : aide à la rééducation linguale lorsque seule l'arcade maxillaire est baguée.

Gouttière bagues uni-maxillaire
avec masses bi-latérales



TAILLE UNIQUE

TAILLE ET DENSITÉ

Taille unique : 1 densité
(médium)

CONTRE-INDICATIONS

Ne convient pas
aux enfants de moins
de 6 ans.

Occlusion de Classe III.

Respirateurs buccaux
exclusifs.



UNI-MAXILLAIRE

Avec masses bi-latérales

BI-MAXILLAIRES

Avec masses bi-latérales
Sans masses bi-latérales

Gouttière bagues bi-maxillaires
sans masses bi-latérales



Gouttière bagues bi-maxillaires
avec masses bi-latérales



Comment choisir la taille de l'appareil ?

La taille **small** : moins de 6 ans.

La taille **middle** : 6 ans et plus.


La **gouttière carrée** se mesure à l'aide d'un **tableau** de concordance (ci-après) correspondant à la Charte de Korkhaus

La taille **large** : secondes molaires comprises.

La taille **X-large** : adultes grandes arcades.

Le **proccluseur** se mesure à l'aide d'une **réglette "Taille réelle"** (ci-dessous)

SOMME DES DIAMÈTRES MÉSIODISTAUX DES 4 INCISIVES SUPÉRIEURES	TAILLE DE LA GOUTTIÈRE CARRÉE
SI = 25	1
SI = 26,2	2
SI = 27,5	3
SI = 28,7	4
SI = 30	5
SI = 31,2	6
SI = 32,5	7
SI = 33,7	8
SI = 35	9
SI = 36,2	10

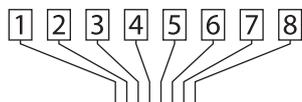

MESURER AU MAXILLAIRE :
DES FACES DISTALES DE 22 À 12
AU 1/3 INFÉRIEUR DES FACES VESTIBULAIRES

i Pour les appareils de 1^{ère} intention, écrans et Déglutix, la taille large est conçue pour les enfants à partir de 6 ans.

Comment choisir la densité de l'appareil ?

	CONFORT	SOLIDITÉ	SUPRACLUSION	OCCLUSION	BRUXISME
Densité souple	++				
Densité médium	+	+	+	+	
Densité rigide		++	++	++	++
Bi-densité souple/médium	++	+	+	+	
Bi-densité médium/rigide	+	++	++	++	++

Outils de communication

Le carnet de traitement

ENFANTS - DE 8 ANS

Le carnet de traitement est destiné à vos plus jeunes patients.

C'est un outil de motivation vous permettant d'optimiser le suivi de traitement.

Composé de fiches pratiques et conseils, d'une fiche de port, d'autocollants pense-bêtes et d'un suivi de rendez-vous, le carnet est personnalisable et sera votre meilleur allié pour motiver votre patient.



Le livret de traitement

ENFANTS + DE 8 ANS

Le livret de traitement est destiné à vos patients de + de 8 ans.

C'est un outil de motivation vous permettant d'optimiser le suivi de traitement.

Il éduque votre patient à l'orthodontie, et le conseille sur l'entretien et le port de son appareil. Il est personnalisable avec sa fiche de rendez-vous et sa fiche de port.



Outils de communication

Le livret Orthodontie Fonctionnelle

ADOLESCENTS ET PARENTS

Le livret orthodontie fonctionnelle est destiné aux adolescents ou aux parents.

Il les informe sur l'intérêt de la rééducation fonctionnelle, en abordant les notions de ventilation, de déglutition, de mastication et de posture.



 Retrouvez nos tarifs pour les outils de communication **page 25**.



**POUR 50 APPAREILS
COMMANDÉS,**
recevez 10 livrets
(Orthodontie Fonctionnelle)

Outils de communication



 Chaque appareil commandé est livré avec sa fiche d'informations et sa fiche de port.

Les fiches d'informations

ENFANTS + DE 8 ANS ET PARENTS

Destinées aux enfants de plus de 8 ans et aux parents.

Elles expliquent l'intérêt de l'appareil et les actions de ce dispositif médical. Vous y trouverez également un mode d'utilisation et la composition de l'appareil.

La fiche de port

ENFANTS + DE 6 ANS

Destinée aux enfants dès 6 ans.

Elle optimise le suivi de traitement de votre patient et vous permet de contrôler l'assiduité du port de l'appareil.

Les fiches conseils et pratiques téléchargeables

Nos fiches sont téléchargeables en PDF sur notre site internet :
www.innovapharm.fr/espace-particulier/fiche-conseils

Notre mascotte OFFI guide vos patients et les conseille sur l'hygiène, le port, etc. Et donne également des informations sur les troubles fonctionnels.



JE M'APPELLE OFFI !

J'accompagne vos jeunes patients sur les outils d'aide à la communication et tout au long de l'espace particulier du site internet pour optimiser leur traitement.

Outils pour votre cabinet

Les posters pour votre cabinet

Nous vous proposons deux modèles de posters pour votre cabinet.

Si vous souhaitez en recevoir à titre gracieux, merci de nous en faire la demande sur mail@innovapharm.fr.



Les vidéos

Les vidéos pour vos patients : Disponibles dans l'espace particulier de notre site internet, ces vidéos expliquent comment optimiser le traitement fonctionnel avec quelques exercices.


Elles sont libres de visionnage sans création de compte pour vos patients.

Vous pouvez également les télécharger en vous connectant sur votre espace professionnel pour les intégrer directement à votre site internet ou pour les diffuser dans votre cabinet.

Vos patients peuvent les visionner sur :

www.innovapharm.fr

ou sur **Youtube**
en tapant Innova Pharm

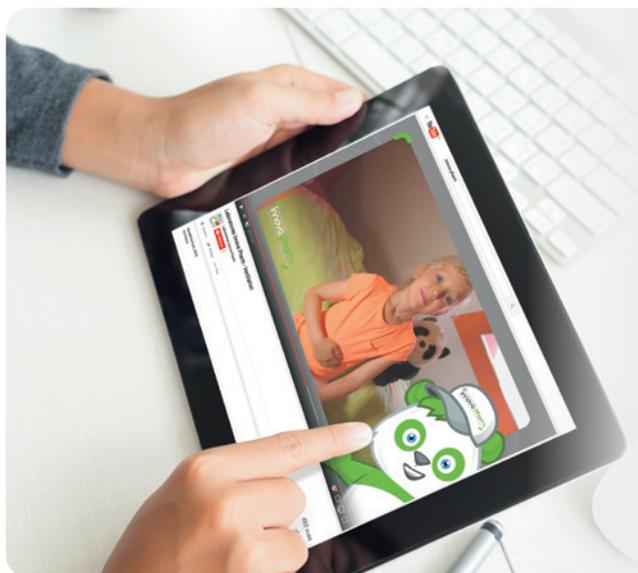

Notre site internet

Espace particulier


UN ESPACE DÉDIÉ À VOS PATIENTS OÙ ILS PEUVENT DÉCOUVRIR

Des informations sur les troubles fonctionnels, les fiches conseils, les questions fréquentes et la rubrique "mon traitement en vidéos".

Notre mascotte OFFI accompagne votre patient tout au long de l'espace particulier.



Notre site internet

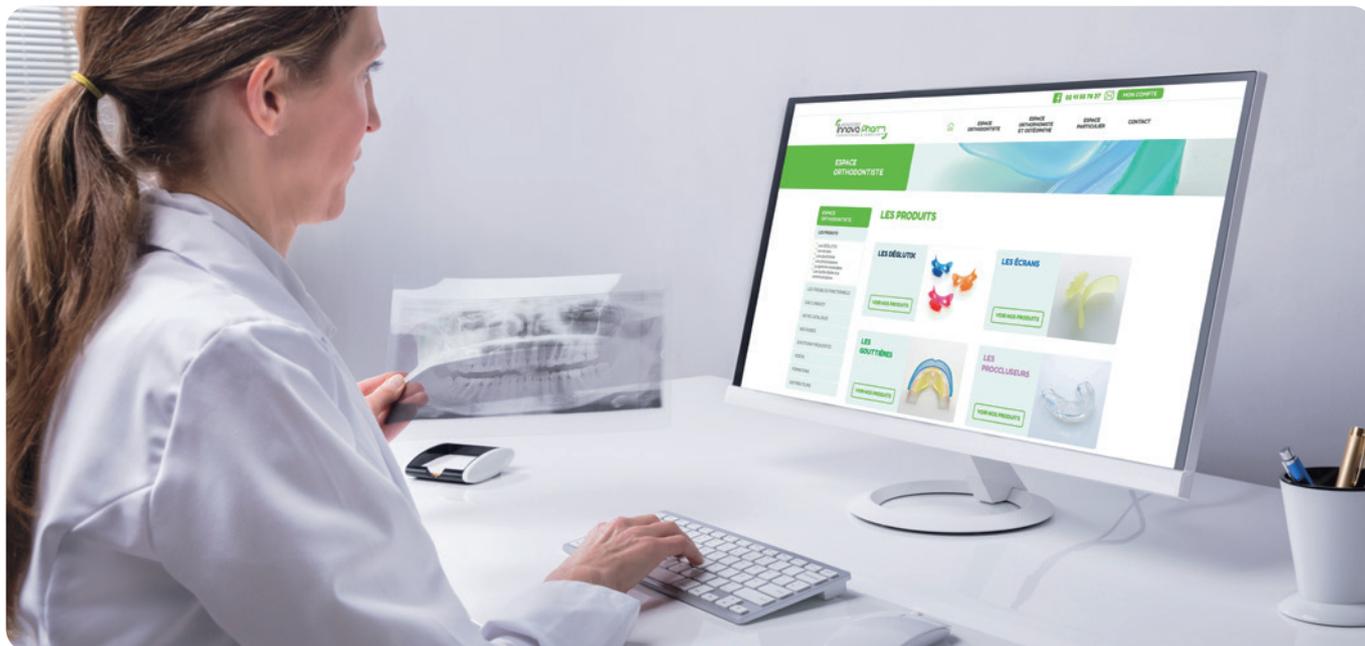

Espace professionnel

ONGLET PROFESSIONNEL

Pour accéder à l'espace professionnel, merci de vous inscrire sur le site (la validation est réalisée dans les 24h, du lundi au vendredi). Vous aurez alors accès à toutes les informations complémentaires, aux tarifs, aux bulletins d'inscription pour les formations, au site marchand pour effectuer vos commandes.

DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES

Elles vous permettront de découvrir et d'apprécier notre gamme d'appareils fonctionnels.

LE SITE MARCHAND

Il vous offre la liberté de commander quand vous le souhaitez et de régler par chèque, carte bancaire ou par virement.

L'orthodateur

L'orthodateur est un outil destiné aux praticiens et aux assistant(e)s

Il permet d'associer une dysfonction à un appareil, et de choisir la taille et la densité de ce dernier.

Si vous souhaitez en recevoir à titre gracieux, merci de nous en faire la demande sur mail@innovapharm.fr.

VENTILATION



ORALE

ÉCRAN TEST
+ pluridiscipline

ORALE
+ nasale

ÉCRAN NUIT
PUIS **GOUTTIÈRES**

NASALE
+ orale

ÉCRAN NUIT
OU **GOUTTIÈRES**

NASALE

PASSER À LA
DÉGLUTITION

DÉGLUTITION



SUCCION
DÉGLUTITION
Lèvres + langue

DÉGLUTIX (30mn)
+ **NUIT**

CONTRACTION
LABIALE

DÉGLUTIX

• **INOCCLUSION**
DENTAIRE
• **INTERPOSITION**
LINGUALE

1 DÉGLUTIX TEST
2 GOUTTIÈRES

SECONDAIRE

PASSER À LA
POSTURE LINGUALE

L'orthodateur

POSTURE LINGUALE



BASSE

GOUTTIÈRE

ANTÉRIEURE

1 DÉGLUTIX TEST
2 GOUTTIÈRES

LATÉRALE

1 GOUTTIÈRES
2 DÉGLUTIX TEST

CORRECTE

PASSER AUX
CLASSES DENTAIRES

LES CLASSES DENTAIRES



CLASSE 1

Gouttières
CLASSE I
+ Bi-densité

CLASSE 2 D1
(décalage)

Gouttières
CLASSE II
+ Bi-densité

CLASSE 2 D2
(supraclusion)

Gouttières
CLASSE II
MEDIUM / RIGIDE
+ Bi-densité

CLASSE 3
FONCTIONNELLE
(non prognathique)

Gouttières
CLASSE III

Mode d'utilisation des appareils

LE DÉGLUTIX :

Comment se positionne le déglutix en bouche ? voir photo page 2.

Un port diurne de 30 minutes est nécessaire. L'enfant ne doit pas penser à son appareil. Il le porte en réalisant une autre activité qui accapare sa concentration : la lecture, la télévision ou un jeu vidéo.

Le port nocturne et les exercices ne sont pas obligatoires.

L'ÉCRAN :

L'écran se positionne librement entre les dents et les lèvres.

LA GOUTTIÈRE CFP, LA GOUTTIÈRE CLASSE I, LA GOUTTIÈRE CLASSE II, LA GOUTTIÈRE CLASSE III, LA GOUTTIÈRE CARRÉE, LES GOUTTIÈRES BAGUES AVEC MASSES BI-LATÉRALES (UNI OU BI-MAXILLAIRES) :

La gouttière se place en bouche, les masses bilatérales vers le bas sous la langue.

La langue se place alors naturellement en haut et en avant.

LE PROCCLUSEUR, LE PROCCLUSEUR MODULABLE :

Des indentations de prémolaires à prémolaires sont prévues pour permettre l'évolution et le placement des dents.

LA GOUTTIÈRE BAGUES SANS MASSES BI-LATÉRALES :

La gouttière se positionne aussi bien dans un sens que dans l'autre.

Lorsque l'appareil est en bouche, la ventilation devient nasale.

Le port diurne recommandé est de 2 h. Des exercices de mastication, de ventilation et de déglutition peuvent être réalisés.

Le port nocturne favorise l'établissement de la ventilation nasale réflexe, et l'automatisation de la déglutition secondaire.

Le matin, il existe une sensibilité sur les dents antérieures ; elle disparaît rapidement et témoigne de l'action de la gouttière sur le bloc incisivo-canin. Les premiers temps (jusqu'à 4 semaines environ), le patient perd souvent sa gouttière la nuit : c'est normal il faut persévérer car la rééducation fonctionnelle est un processus long.

Code couleur des appareils

 **Vert** : densité souple

 **Bleu** : densité médium

 **Jaune** : densité rigide

Entretien des appareils



Tous nos appareils se nettoient à l'eau froide avec une brosse à dents et un nettoyant de votre choix (Dentifrice, savon neutre...)

Les appareils de 1^{ère} intention (Déglutix et écrans) peuvent être stérilisés à l'autoclave à 134° en cycle PRION.

Il est recommandé de placer l'appareil 1h par semaine dans un bain de bouche dilué, ou tout autre solution équivalente.

Ne jamais le faire bouillir.

ATTENTION : L'absence d'entretien de l'appareil et de sa boîte ainsi qu'une mauvaise hygiène buccale peuvent provoquer des réactions inflammatoires.

Composition des appareils

Nos appareils sont produits à partir de matières de grade médical et de colorants alimentaires répondant aux normes FDA, USP Classe VI et ne contenant ni bisphénol, ni phtalates, ni PVC, ni perturbateurs endocriniens.



Nos journées de formation

**Une formation théorique,
pratique et clinique.**

Les dates vous sont communiquées sur :

www.innovapharm.fr/
espace professionnel, onglet formations



Notre démarche écologique

Nouveauté

INNOVA PHARM s'engage dans une démarche écologique.

L'intégralité de sa gamme est produite dans le Maine et Loire (49).

Afin d'avoir un impact écologique, les cartons, fiches d'informations, fiches de port et sachets de conditionnement sont désormais recyclables.

Tous nos outils sont disponibles en téléchargement gratuit sur notre site.

www.innovapharm.fr



CARTONS,
FICHES ET
SACHETS
RECYCLABLES



DÉMARCHE
ENVIRONNEMENT



FABRICATION
FRANÇAISE



5 bd Pierre Lecoq • BP30451
49304 CHOLET Cedex • FRANCE

02 41 58 78 37

mail@innovapharm.fr



www.innovapharm.fr

